

INSTALLATION

Optovist 2.0.010

SOMMAIRE

1	PRE REQUIS ET INFORMATIONS	2
1.1	Installation du logiciel	2
1.2	Installation de la reconnaissance vocale « Speech API »	4
1.3	Configuration du logiciel	7
1.4	Connexion du matériel (et installation du driver)	7
1.5	Droits ACL	8
1.6	Lancement du logiciel sous la session de l'utilisateur	8
2.	SIGNATURE APPLICATIVE	8
2.1	Enregistrement dans «Ajout/suppression de programmes»	8
2.2	Localisation et version exécutable	8

1. PRE REQUIS ET INFORMATIONS

Pré requis	Valeur
OS	Windows XP/Vista/Seven
Software	N/A
Hardware – Espace disque	700 Mo d'espace libre
Durée d'installation	30 Min
Éditeur	VISTEC
Coordonnées éditeurs	http://www.eolys.fr
Support éditeur	fkettin@eolys.fr
Reboot nécessaire (si oui préciser le nombre)	Non

Description du logiciel :

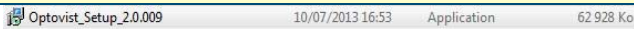
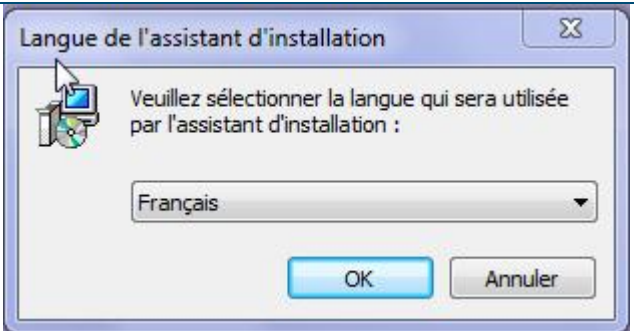
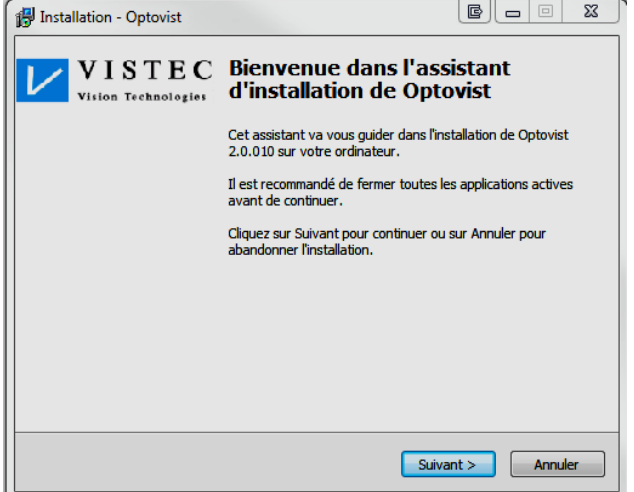
Optovist est un logiciel permettant d'utiliser l'appareil de contrôle de la vision Optovist.

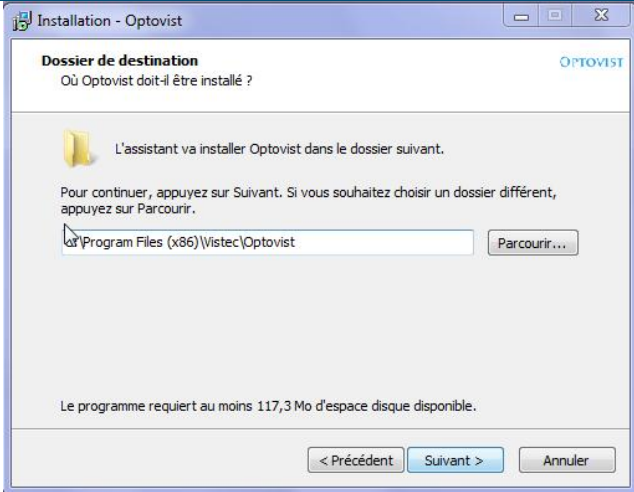
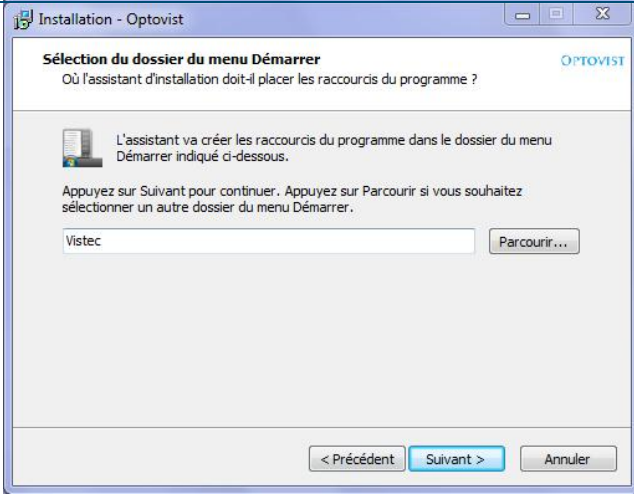
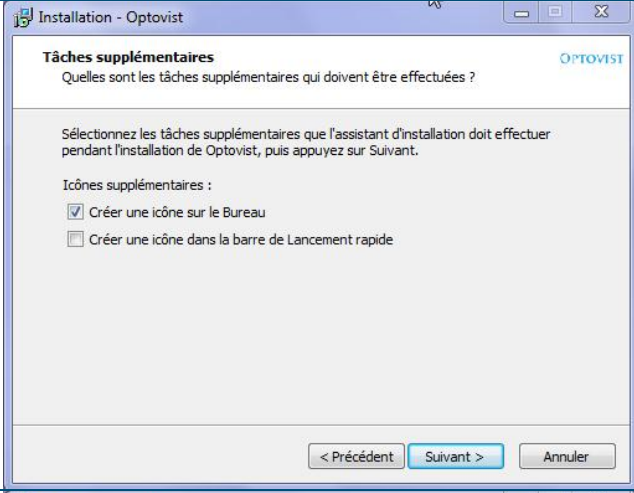
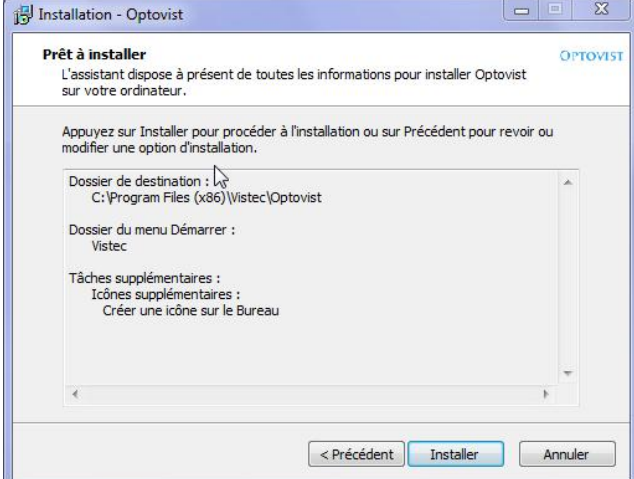
**Cette installation nécessite d'être administrateur du poste de travail.
Le matériel doit être impérativement disponible, et prêt à être connecté.**

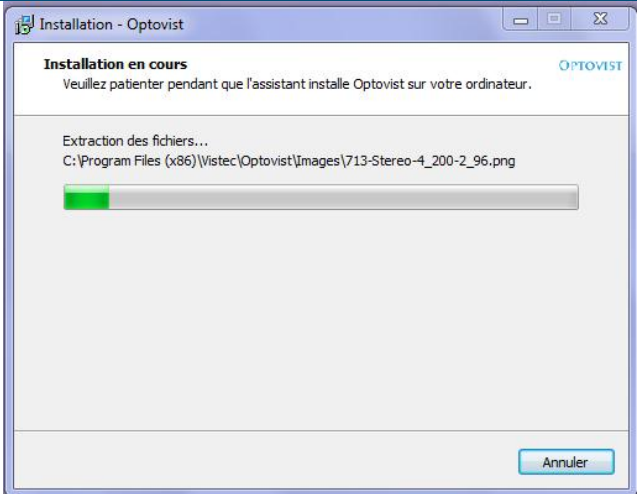
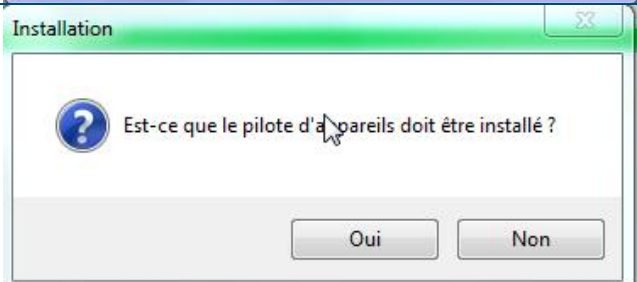
Détail du matériel nécessaire pour l'installation :

- Appareil OPTOVIST EOLYS + câble USB
- Casque audio avec microphone et câblé USB

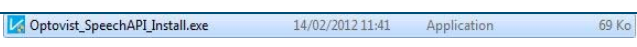
1.1 Installation du logiciel

Etape	Action
Lancer Optovist_Setup_2.0.010	
Cliquer sur [OK]	
Cliquer sur [Suivant]	

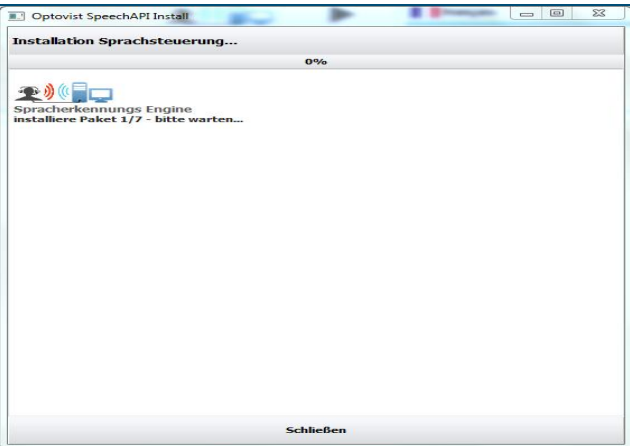
Etape	Action
Laisser le répertoire par défaut. Cliquer sur [Suivant]	
Cliquer sur [Suivant]	
Cocher la case « <i>Créer une icône sur le Bureau</i> » Cliquer sur [Suivant]	
Cliquer sur [Installer]	

Etape	Action
L'installation démarre...	
Lorsque cette fenêtre apparaît, cliquer sur [Non]	
L'installation est terminée. DECOCHER LA CASE « Exécuter Optovist ». Cliquer sur [Terminer]	

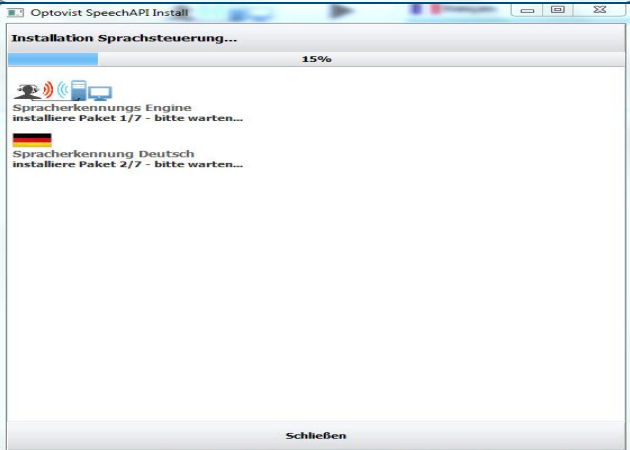
1.2 Installation de la reconnaissance vocale « Speech API »

Dans le media contenant les fichiers d'installation (CD, clé USB ou autre) cherchez ce répertoire-là : ...\IPlugins\speechapi Copier le répertoire entier « speechapi » dans : C:\Program Files (X86)\Vistec\Optovist\Plugins\ (Remplacer le dossier existant)	
Se positionner dans : C:\Program Files (X86)\Vistec\Optovist\Plugins\speechapi Exécuter Optovist_SpeechAPI_Install.exe	

L'installation démarre automatiquement

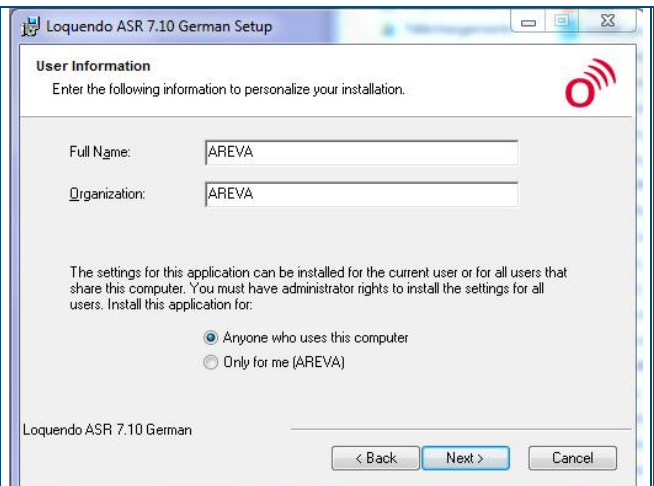


L'installation Allemande, Française puis Anglaise se déroule...



Normalement c'est automatique, mais il se peut que vous ayez à valider les 3 fenêtres suivantes :

Les valider toutes les 3 par **[Next]** en cochant la case « *I accept the licence agreement* » sur la dernière fenêtre.



Loquendo ASR 7.10 German Setup

User Information
Enter the following information to personalize your installation.

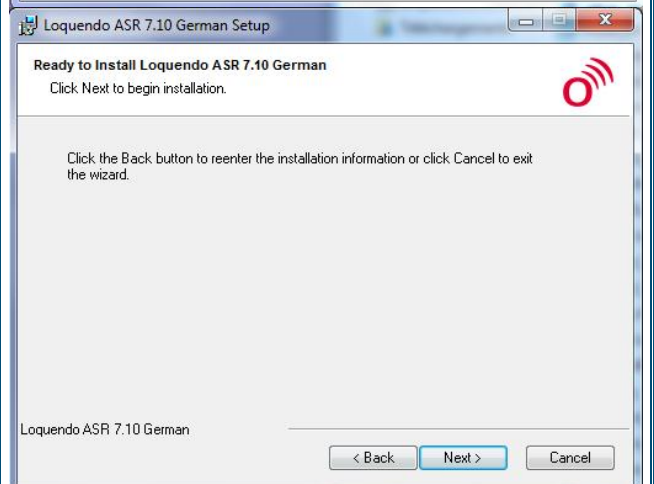
Full Name: AREVA
Organization: AREVA

The settings for this application can be installed for the current user or for all users that share this computer. You must have administrator rights to install the settings for all users. Install this application for:

☒ Anyone who uses this computer
☐ Only for me (AREVA)

Loquendo ASR 7.10 German

< Back Next > Cancel



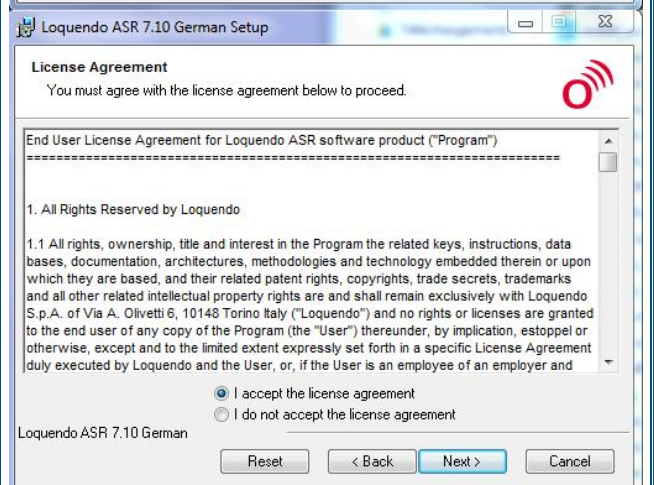
Loquendo ASR 7.10 German Setup

Ready to Install Loquendo ASR 7.10 German
Click Next to begin installation.

Click the Back button to reenter the installation information or click Cancel to exit the wizard.

Loquendo ASR 7.10 German

< Back Next > Cancel



Loquendo ASR 7.10 German Setup

License Agreement
You must agree with the license agreement below to proceed.

End User License Agreement for Loquendo ASR software product ("Program")

1. All Rights Reserved by Loquendo

1.1 All rights, ownership, title and interest in the Program the related keys, instructions, data bases, documentation, architectures, methodologies and technology embedded therein or upon which they are based, and their related patent rights, copyrights, trade secrets, trademarks and all other related intellectual property rights are and shall remain exclusively with Loquendo S.p.A. of Via A. Olivetti 6, 10148 Torino Italy ("Loquendo") and no rights or licenses are granted to the end user of any copy of the Program (the "User") thereunder, by implication, estoppel or otherwise, except and to the limited extent expressly set forth in a specific License Agreement duly executed by Loquendo and the User, or, if the User is an employee of an employer and

☒ I accept the license agreement
☐ I do not accept the license agreement

Loquendo ASR 7.10 German

Reset < Back Next > Cancel

L'installation est terminée.

Cliquer sur **[Finish]**



Loquendo ASR 7.10 German Setup

Loquendo ASR

Loquendo ASR 7.10 German has been successfully installed.

Click the Finish button to exit this installation.

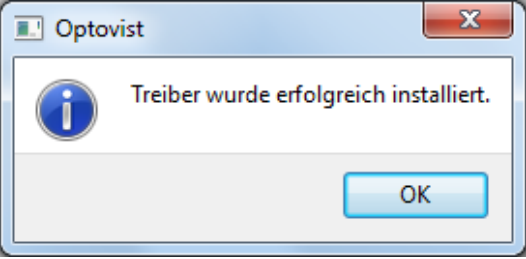
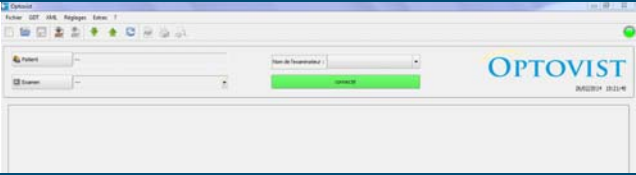
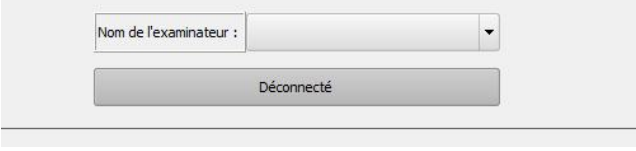
< Back Finish Cancel

1.3 Configuration du logiciel

La configuration du logiciel consiste à copier le dossier et le fichier suivant :

« **Templates** » fourni séparément par éolys dans « **C:\Program Files (X86)\Vistec\Optovist** » en ayant précédemment supprimé le répertoire « Templates » déjà présent.

1.4 Connexion du matériel (et installation du driver)

Connecter l'appareil Optovist par le cordon USB. NE PAS ALLUMER LE L'APPAREIL	
Lancer le logiciel Optovist via l'icône sur le bureau	
Allumer l'appareil via le bouton « ON/OFF » et attendre environ 30 secondes jusqu'à entendre un petit bruit moteur provenant de l'appareil.	
Une fois le matériel démarré, le pilote s'installe automatiquement. Le message ci-contre indique que le driver a bien été installé.	
L'interface d'Optovist devrait se présenter comme ci-contre, avec le bouton connecté en vert .	
Si le statut de connexion apparait grisé ou rouge comme ci-contre cliquer dessus pour connecter l'appareil.	
Connecté ensuite la casque Audio. Il s'agit d'une connexion USB composite qui ne nécessite pas d'installation de driver spécifique, Windows le détecte et l'installe automatiquement.	
Installation terminée.	

1.5 Droits ACL

Mettre les droits en contrôle totale aux utilisateurs sur :

C:\Program Files (X86)\Vistec

1.6 Lancement du logiciel sous la session de l'utilisateur

- Ferme la session administrateur.
- Ouvrir la session utilisateur.

- Cliquer sur l'icône  présente sur le bureau.

2. SIGNATURE APPLICATIVE

2.1 Enregistrement dans «Ajout/suppression de programmes»

 Optovist 2.0.009	Vistec AG	26/02/2014	117 Mo	
 Loquendo ASR 7.10 Engine	Loquendo	26/02/2014	113 Mo	7.10.0
 Loquendo ASR 7.10 German	Loquendo	26/02/2014	35,4 Mo	7.10.0
 Loquendo TTS 7 - Multimedia High Quality	Loquendo SpA	26/02/2014	323 Mo	

2.2 Localisation et version exécutable

C:\Program Files (x86)\Vistec\Optovist\Optovist.exe

